



# Att välja storlek

## Måttabeller och instruktioner

### för olika modeller

#### **ALLMÄNT OM MÅTTAGNINGEN:**

För att få rätt passform är det lämpligt att be någon att hjälpa till med måttagningen. Om kläder används skall de vara tunna. Tag av skorna och stå med fötterna 5-10 cm isär med armarna hängande löst utefter sidorna. Använd helst ett vanligt måttband. Håll måttbandet rakt, parallellt med golvet och i ett fast grepp utan att låta det "gräva" in i huden eller kläderna. Mät alltid två gånger för att vara säker.

Eftersom kompressionsplagg är gjorda för att sitta tajt är korrekta mått viktiga för att plagget skall ge rätt kompression och stöd. Om man önskar en lite lösare passform för att rymma bandage eller stora svullnader kan man välja en storlek större än den som anges i tabellen.

# BH

Avser modellerna: 450, 452, 454, 454-1, 457-Z, 457, 458, 458-U, 456, 465, 4510.

**Design Veronique BH-storlekar bestäms av ditt mått under bysten, inte av kupstorleken.**

Vid bröstförstoring eller -förminskning vet man inte den exakta kupstorleken förrän efter ingreppet. Alla mått i storlekstabellen är viktiga för att du skall få rätt storlek. Följ därför instruktionerna noga.


**Under bysten:** Mät före operationen. Måttet tas runt bröstkorgen, omedelbart under bysten. Detta är det under-bysten-mått du skall använda för att bestämma din Design Veronique BH-storlek. Välj den storlek i tabellen som motsvarar ditt mått under bysten.

**Exempel:** Ett mått under bysten på 78 cm motsvarar storlek M (medium).

**Kupstorlek:** Design Veronique BH är designade så att de följer konturen av bröstets storlek efter operationen. Därför behövs kupstorleken inte. Alla Design Veronique BH-storlekar bygger på måttet under bysten.

## Tips för måtttagning och storlekar:

- Vanlig BH-storlek och under-bysten-mått är inte samma sak
- Under-bysten-måttet används bara för BH.
- Det finns förlängare som ökar BH'ns omkrets till alla Design Veronique BH.

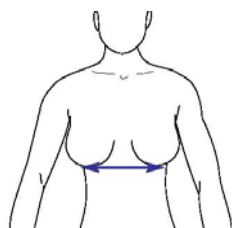

Storlek	Under-bysten-mått
XS	63 -67
S	68 -77
M	78 -87
L	88 -97
XL	98 -107
XXL	108 -118
3X	119 -125

# Arm & Överkropp

Avser modellerna: B943, 935, BV930, BV933, L933, DC-65, 650, 654

**Storleken på dessa modeller bestäms av måtten på Biceps, bysten eller under bysten.**


**Biceps:** Med armarna utefter sidorna, mät runt den störstadelen av överarmen, på eller ovanför biceps. Du behöve rha hjälp av någon för att ta detta mått.

**Byst:** För boleros (BV930, BV933) och västar (650,654), mät över den största delen av bysten. Bär dina vanliga underkläder när du tar måttet.

**Under bysten:** För BH med ärm (B943) används under-bysten-måttet i stället för bystmåttet (se måttagningsinstruktioner för BH).

## Tips för måtttagning och storlekar:

- Om dina mått faller mellan olika storlekar är det bicepsmåttet som avgör. Övriga delar av plagget är justerbara.

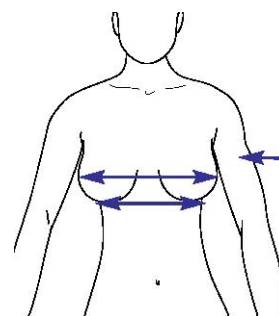

Storlek	Biceps	Byst	Under Bysten
XS	24 -26	68 -74	63 -67
S	27 - 28	75 - 82	68 -77
M	29 - 31	83 - 92	78 -87
L	32 - 33	93 - 102	88 -97
XL	34 -36	103 -113	98 107
XXL	37 - 39	114 - 122	108 118
3X	40 - 43	124 - 132	119 -125
4X	43 - 46	134 -142	126 -132

# Gördlar

Avser modellerna: 75, 145, 750, 1450, 753, 1453, 755, 1455, 85, 165, 850, 1650 853, 1653, 853-H, 1653-H, 855, 1655, 855-H, 1655-H, 350-6, 350-9 och 1054.


**Storleken på Design Veronique Gördlar bestäms av måtten på midja och stuss.**

**Midja:** Mät den smalaste delen av midjan vid eller över naveln.

**Stuss:** Mät där stussen är störst, med måttbandet parallellt med golvet.

## Tips för måttagning och storlekar:

- Storleken på gördlar med dragkedja mäts före operationen – de tar hänsyn till svullnad direkt efter operationen. När svullnaden lagt sig är det lämpligt med en gördel utan dragkedja. Dessa är snävare och ger extra kompression.
- Om dina mått faller mellan olika storlekar, välj den större storleken. T ex Stuss = M och midja = L, välj storlek L.
- Måttet under bysten används aldrig för gördlar.

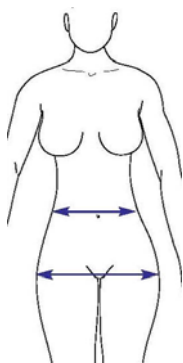

Storlek	Midja	Stuss
XS	53 – 59	78 - 85
S	60 – 67	86 – 92
M	68 – 74	93 – 100
L	75 – 82	101 - 107
XL	83 – 90	108 – 114
XXL	91 – 100	114 – 122
3X	101 – 110	124 – 133
4X	111 – 120	134 - 142

# Rubenesque Gördlar

Avser modellerna: R750, R754, R756, R850, R854, och R856.


**Storleken på Design Veronique Rubenesque Gördlar bestäms av måtten på midja och Stuss.**

**Midja:** Mät den smalaste delen av midjan vid eller över naveln.

**Stuss:** Mät där stussen är störst, med måttbandet parallellt med golvet.

## Tips för måttagning och storlekar:

- Rubenesque gördlar är gjorda för kvinnor med smalare midja, "timglasfigur". Dessa gördlar har paneler som ger extra kompression och konturerande passform.
- Om dina mått faller mellan olika storlekar, välj den större storleken. T ex Stuss = M och midja = L, välj storlek L.
- Måttet under bysten används aldrig för gördlar.

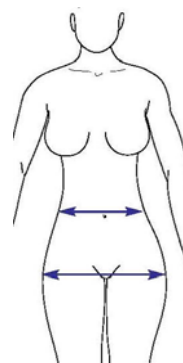

Storlek	Midja	Stuss
XS	45 - 52	78 - 85
S	53 – 59	86 – 92
M	60 – 67	93 – 100
L	68 – 74	101 - 107
XL	75 – 82	108 – 114
XXL	83 – 92	114 – 122
3X	93 - 103	124 – 133
4X	104 - 112	134 - 142

## B-Serien Gördlar

Avser modellerna: B85, B165, B853, B1653, B855, B1655, BA85, BA853, BA855, B850TCP.

**B-Seriens storlek bestäms av måtten på midja och stuss. För modellerna med ärm behövs även måttet på biceps.**


**Midja:** Mät den smalaste delen av midjan vid eller över naveln.

**Stuss:** Mät där stussen är störst, med måttbandet parallellt med golvet.

**Biceps:** Med armarna hängande utefter sidan, mät den största delen av överarmen, vid eller ovanför biceps. Du måste ha hjälp med att ta detta mått.

### Tips för måttagning och storlekar:

- Om dina mått faller mellan olika storlekar, välj den större storleken. T ex Stuss = M och midja = L, välj storlek L.
- Måttet under bysten används aldrig för gördlar.
- Bicepsmått behövs för modeller med ärm.

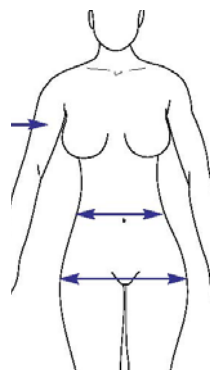

Storlek	Midja	Stuss	Biceps
XS	53 – 59	78 - 85	24 – 26
S	60 – 67	86 – 92	27 – 28
M	68 – 74	93 – 100	29 – 31
L	75 – 82	101 - 107	31 – 34
XL	83 – 90	108 – 114	34 - 36
XXL	91 – 100	114 – 122	37 – 39
3X	101 – 110	124 – 133	40 – 42
4X	111 – 120	134 - 142	43 – 46

## Herrplagg

Avser modellerna: 640, 1240, 642, DC-64, V840, V1640, 840, 1640, 743, G740, BS843, 340-9 och 340-12.

**Storleken på Design Veronique herrplagg bestäms av bröst-, midje- och höftmått.**

**Bröst:** Stå rakt med fötterna en axelbredd isär. Armarna skall hänga löst utefter sidorna. Mät runt det bredaste stället runt bröstet.


**Midja:** Mät runt midjan i höjd med naveln.

**Stuss:** Mät runt det bredaste stället runt höften.

Var noga med att hålla måttbandet rakt, parallellt med golvet.

### Tips för måttagning och storlekar:

- De flesta herrplagg har justerbara axelband för att passa även långa personer
- Klädstorlekar och verkliga mått kan skilja mycket. Välj därför inte storlek på ditt kompressionplagg utifrån den vanliga klädstorleken. T ex betyder inte byxstorlek 34” x 32” att midjemåttet är just 34” (86 cm).
- Om du hamnar mellan två storlekar, välj den större. T ex Stuss = M och midja = L, välj storlek L.

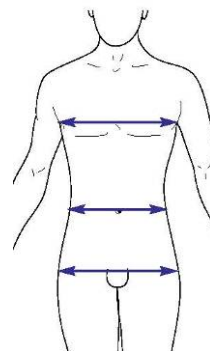

Storlek	Midja	Stuss	Bröst
S	79 -85	91 -97	89 - 95
M	86 -92	98 -105	96 - 105
L	93 100	106 -113	106 115
XL	101 - 110	114 - 120	116 - 125
XXL	111 - 123	121 - 130	126 -135
3X	124 - 135	131 - 141	136 -148
4X	136 - 143	142 - 150	149 -158